



## Veneer Set Coffret pour facettes



An essential condition for a successful restoration with ceramic veneers is for example a systematic, conservative preparation. This poses a particular challenge for the dentist: On one hand, a certain amount of material needs to be removed, on the other hand, care has to be taken not to penetrate too deeply into the enamel.

In response to this, a new set was developed that contains all the required instruments.

The set comprises newly developed depth markers (868B) to define the reduction depths (0.3 and 0.4 mm), resulting in a final preparation depth of 0.4 or 0.5 mm after finishing. In addition, the set contains tapered medium grit (100  $\mu\text{m}$ ) diamond abrasives (868) and fine grain (30  $\mu\text{m}$ ) diamond finishing instruments (8868) to match the new depth markers. The depth markers, abrasives and finishing instruments are all congruent in size (taper with rounded tip). Two coordinated sizes cover all indications in the entire anterior zone. An egg-shaped diamond abrasive (379) and the matching finishing instrument (8379) allow the preparation of function-correcting palatal veneers.

### Recommendations for use:

- Use preferably in a red contra-angle, observing the speed indicated on the packaging.
- Always supply plenty of spray cooling (at least 50 ml/min.)

*La condition préalable pour le succès clinique des facettes céramique, c'est – entre autres – une préparation systématique et conservatrice. Ce type de préparation représente un grand défi dans le cas des facettes car, d'une part, une certaine quantité de substance doit être enlevée, d'autre part on doit éviter de pénétrer trop profondément dans l'émail.*

*Pour faciliter le traitement, un nouveau coffret a été développé. Celui-ci comprend tous les instruments nécessaires pour obtenir un bon résultat.*

*Le coffret comprend un repère de profondeur pour contrôler la profondeur de pénétration (0,3 et 0,4 mm), permettant ainsi d'obtenir après la finition la profondeur de préparation finale de 0,4 ou 0,5 mm.*

*Le coffret comprend également des abrasifs diamantés coniques (868) avec granulométrie moyenne (100  $\mu\text{m}$ ) et des fraises à finir diamantées (8868F) revêtues de grains fins (30  $\mu\text{m}$ ). Tous les instruments sont de forme congrue (conique, avec pointe arrondie). Ils sont disponibles dans deux tailles pour couvrir toute indication dans la région antérieure. Un abrasif diamanté de forme ovoïde (379) pour la mise en forme palatine et une fraise à finir (379F) de forme identique complètent le coffret.*


### Recommandations d'utilisation :

- Travailler de préférence sur contre-angle rouge, avec peu de pression, en observant les vitesses indiquées sur l'emballage.
- Utiliser le spray de façon abondante (mini 50 ml/min.).






**Veneer Set**  
Coffret pour facettes

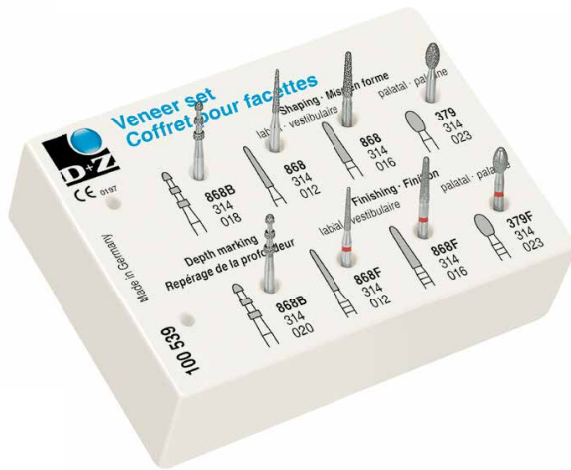

**100539**

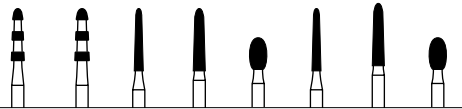

Contents - Contenu

REF	868B	868B	868	868	379	868F	868F	379F
... .314. ...	018	020	012	016	023	012	016	023
	1	1	1	1	1	1	1	1

**Drendel + Zweiling**  
DIAMANT GmbH  
Schürenbreder Weg 27  
32689 Kalletal · Germany

fon: +49 (0) 5264 6579280  
fax: +49 (0) 5264 6579284  
info@drendel.com  
www.drendel.com