



Fraise pour le retrait de la colle *Removedor de adhesivo*



La société D+Z propose une fraise spécialement conçue pour le retrait de la colle en toute sécurité. Grâce à la géométrie spéciale de sa denture et au bout mousse pour protéger la gencive, cette fraise est idéalement adaptée à ce fin. Elle est également dotée d'un chanfrein de sécurité pour éviter la formation de rayures sur l'émail dentaire sain. Cet instrument enlève rapidement les résidus de colle, à condition que la vitesse recommandée soit observée. Lorsque la colle résiduelle est retirée complètement, l'émail peut être légèrement poli, selon vos besoins. L'instrument est disponible en deux longueurs. La version plus longue est particulièrement adaptée au retrait de la colle des canines et des dents antérieures longues.

Avantages :

- Bout mousse pour protéger la gencive
- Chanfrein de sécurité pour éviter la formation de rayures
- Denture spéciale pour le retrait de la colle, tout en épargnant l'émail
- Surfaces parfaitement lisses après le traitement

Recommandations d'utilisation :

- Sur contre-angle rouge :
Vitesse optimale 120.000 t/min.
- Sur turbine :
Vitesse optimale 160.000 t/min.

Para la remoción segura de los restos de adhesivo, D+Z ofrece removedores de adhesivo con una geometría de corte especial. Estos instrumentos tienen una punta sin cortes (punta segura) para proteger la encía. Además el bisel de seguridad en la base de la cabeza elimina la formación de ranuras en la sustancia sana del esmalte. Respetando la velocidad recomendada y con una presión de contacto reducida es posible remover rápidamente los restos de adhesivo, las superficies dentales pueden ser pulidas con facilidad. Los instrumentos están disponibles en dos longitudes de cabeza. La versión más larga fue especialmente diseñada para caninos y anteriores largos.

Ventajas:

- Punta sin cortes para no dañar la encía
- Bisel de seguridad para evitar la formación de ranuras
- Remueve restos de adhesivo, protege la encía
- Superficies lisas después del tratamiento



Recomendaciones para el uso:

- En el contra-ángulo rojo:
Velocidad óptima 120.000 rpm
- En la turbina:
Velocidad óptima 160.000 rpm





Fraise pour le retrait de la colle
Removedor de adhesivo

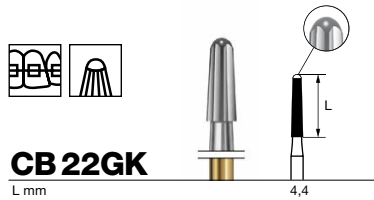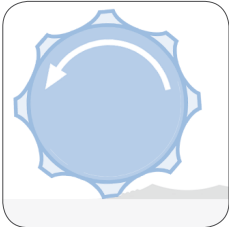


CB 22GK

L mm

4,4

| | |
|-----|---------------|
| REF | CB 22GK |
| ISO | ...314... 016 |

max. 160.000 t/min./rpm

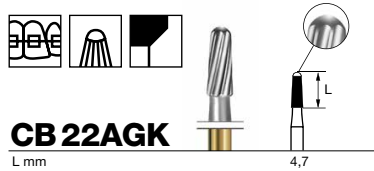

CB 22AGK

L mm

4,7

| | |
|-----|---------------|
| REF | CB 22AGK |
| ISO | ...314... 016 |

max. 160.000 t/min./rpm



CB 22ALGK

L mm

8,3

| | |
|-----|---------------|
| REF | CB 22ALGK |
| ISO | ...314... 016 |

max. 160.000 t/min./rpm

Bout mousse pour protéger la gencive

Punta sin cortes para no dañar la encía

Chanfrein de sécurité pour éviter la formation de rayures

Bisel de seguridad para evitar la formación de ranuras

Pour le retrait de la colle, tout en épargnant la gencive

Remueve restos de adhesivo, protege la encía

Drendel + Zweiling
 DIAMANT GmbH
 Schürenbreder Weg 27
 32689 Kalletal · Germany
 fon: +49 (0) 5264 6579280
 fax: +49 (0) 5264 6579284
 info@drendel.com
 www.drendel.com